

GENESIS CONTAINER

CD-B・C Series / CR Series / CD-ST Series

ジェネシス コンテナ
CD-B・Cシリーズ / CRシリーズ / CD-STシリーズ



GENESIS コンテナのご紹介

弊社ではこの度、手術室・中央材料室業務の

省力化のためにコンテナシステムをご提案いたします。

従来看護師さんが手術器具類のセット組みを行なっておりましたが、

コンテナシステムを採用することにより、

経験の浅い方でも簡単にセット組みが行なえ、看護師さんが本来の業務に専念することが出来ます。

コンテナは寸法が統一されており、滅菌有効期限が6ヶ月間と長く、滅菌物の保管管理に大きなメリットが期待出来ます。

また、コンテナは単品利用でも有効ですし、緊急の手術や特殊なセット組みにも安心してご使用いただけます。

感染症の患者に対する使用済みの器具類は

リムーバルコンテナで安全に中央材料室まで運ぶ事が出来ます。

これからの手術室・中央材料室業務のあり方に対し

少しでも貴院のお役に立てればと思っております。

ジェネシスコンテナー

CD-B.C シリーズ

エチレンオキサイド滅菌 (EOG) 及び蒸気滅菌器での使用に適応する滅菌コンテナーです。

対応滅菌

重力式蒸気滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌

ジェネシスコンテナー

CD-ST シリーズ

過酸化水素プラズマ滅菌対応

過酸化水素プラズマ滅菌対応コンテナーはステラッド®50,100及び100Sシステム及びエチレンオキサイド滅菌 (EOG) 及び真空式蒸気滅菌器での使用に適応する滅菌コンテナーです。

対応滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌


プラズマ滅菌



●コンテナは積み重ねが出来るようになっており、下に汚染物があっても大丈夫です。



●ラッチは蓋を開けるとはねあがり、蓋のハンドル(取っ手)になり、取り外しが容易です。

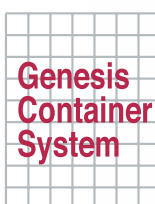


Genesis Container

特 長



●フィルター保持板のホールは中心点をずらしてあるので、フィルターの穴あきを防止します。

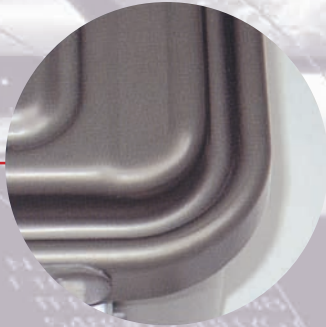

●ガスケットが大きく、滅菌度が保たれます。



●IDタグは入れかえが出来る様々な識別が可能です。



●コンテナは一体加工でリベットを使用していないので破損しにくい構造です。また、ハード陽極処理を施しており頑強で、気密性が優れています。



●キャリングハンドルは大きく、上に90度まで上がりシリコンカバーが付いていて、持ち運びに便利です。



●アロー型インジケーターで滅菌後の誤開放を防止します。

CD-B·C Series GE

コンテナ



●ハーフサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-630-03	CD1-4C	279×305×100	底穴なし
08-630-04	CD1-5C	279×305×127	底穴なし
08-630-05	CD1-6C	279×305×152	底穴なし
08-631-03	CD1-4B	279×305×100	底穴あり
08-631-04	CD1-5B	279×305×127	底穴あり
08-631-05	CD1-6B	279×305×152	底穴あり



●ミッドサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-630-06	CD2-4C	483×305×100	底穴なし
08-630-07	CD2-5C	483×305×127	底穴なし
08-630-08	CD2-6C	483×305×152	底穴なし
08-630-09	CD2-8C	483×305×203	底穴なし
08-631-06	CD2-4B	483×305×100	底穴あり
08-631-07	CD2-5B	483×305×127	底穴あり
08-631-08	CD2-6B	483×305×152	底穴あり
08-631-09	CD2-8B	483×305×203	底穴あり



●フルサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-630-10	CD3-4C	584×305×100	底穴なし
08-630-11	CD3-5C	584×305×127	底穴なし
08-630-12	CD3-6C	584×305×152	底穴なし
08-630-13	CD3-7C	584×305×178	底穴なし
08-631-10	CD3-4B	584×305×100	底穴あり
08-631-11	CD3-5B	584×305×127	底穴あり
08-631-12	CD3-6B	584×305×152	底穴あり
08-631-13	CD3-7B	584×305×178	底穴あり



●ミニサイズコンテナ(プロテクタープレートなし)

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-630-01	CD0-3C	267×190×76	底穴なし
08-631-01	CD0-3B	267×190×76	底穴あり

NEISIS CONTAINER

Genesis
Container
System

対応滅菌

重力式蒸気滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌

コンテナ



●クォーターサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-630-02	CD0-4C	305×203×100	底穴なし
08-631-02	CD0-4B	305×203×100	底穴あり



●エンドサイズコンテナ(スモール/S・ラージ/L)

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-631-14	CD4-5B	533×178×140	(S)底穴あり
08-631-15	CD5-61B	711×279×152	(L)底穴あり

CR Series GENESIS CONTAINER

回収用

※CRシリーズは回収用です。滅菌には使用できません。



●リムーバブルコンテナ(回収・密封用)

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)
08-632-01	CR1-6	279×305×152
08-632-02	CR2-6	483×305×152
08-632-03	CR3-6	584×305×152

CD-ST Series GE

コンテナ



●ハーフサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-629-01	CD1-4ST	279×305×100	底穴あり
08-629-02	CD1-5ST	279×305×127	底穴あり
08-629-03	CD1-6ST	279×305×152	底穴あり



●ミッドサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-629-04	CD2-4ST	483×305×100	底穴あり
08-629-05	CD2-5ST	483×305×127	底穴あり
08-629-06	CD2-6ST	483×305×152	底穴あり



●フルサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-629-07	CD3-4ST	584×305×100	底穴あり
08-629-08	CD3-5ST	584×305×127	底穴あり
08-629-09	CD3-6ST	584×305×152	底穴あり



●ミニサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-629-10	CD0-3ST	267×190×76	底穴あり

NESIS CONTAINER

Genesis
Container
System

対応滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌

プラズマ滅菌

コンテナ



●クォーターサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-629-11	CD0-4ST	305×203×100	底穴あり



●スモールサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H (mm)	規格
08-629-12	CD4-3ST	533×178×76	底穴あり
08-629-13	CD4-5ST	533×178×140	底穴あり

注:CD-STフィルター保護板(12頁)はオプション品となります。



過酸化水素プラズマ滅菌でご使用の際の注意事項

- 本品は、過酸化水素プラズマ滅菌器STERRAD®に対応したコンテナです。
- 本品は、STERRAD®100、100S、50において滅菌効果が確認されています。
- コンテナを積み重ねてはいけません。
- 過酸化水素プラズマ滅菌を行う際は、必ずFSTシリーズ及びNSTシリーズのフィルターペーパーを使用してください。
なお、EOG／真空式蒸気滅菌を行う際は、FO3シリーズ・FX3シリーズ・FSTシリーズのフィルターペーパーを使用してください。
- フィルター保護板は滅菌剤(過酸化水素)の通しを妨げるために使えません。
- データカードは必ずMH1-1を使用してください。データカードMD1-1は滅菌剤を吸着してしまうため使えません。
- 必ず専用インジケータアローAH2-1を使用してください。なおラベル部は過酸化水素プラズマ滅菌にさらされると、黄色から青に変色する仕組みになっております。なお、蒸気やEOガスにさらされても色は変わりません。
- テフロン(HP1シリーズのクランプ)は適合します。
- CD-B.Cシリーズ滅菌コンテナ(濃いグレーの上蓋／薄いグレーの下部)はSTERRAD®滅菌器には使用できません。

バスケット

- 1.足が付いているので、保持板を傷つけません。
- 2.バスケットのハンドルには、バーティカルとスタンダードの2タイプあります。
- 3.バスケットのハンドルが垂直に上がる為、邪魔になりません。
(バーティカルハンドルのみ)
- 4.バスケットの表面は電解研磨をしており、耐腐食性に優れ
器具類にキズが付きにくいです。

(ハンドルタイプ)



バーティカルタイプ

※バーティカルハンドルは
スタンダードハンドルに変更出来ます。
発注の際にご用命ください。



スタンダードタイプ

(パンチングバスケット)

- 1.ドレープでも包み易い形状になってます。
- 2.器具類が引っ掛かりにくいので、シリコンパッドとの
組み合わせにより、マイクロ・微細器具セットの格納に
適しています。




パンチングバスケット



●ハーフサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-636-02	BP1-2V	234×267×50	パーティカルハンドル
08-636-03	BP1-3V	234×267×76	パーティカルハンドル
08-636-04	BP1-4V	234×267×100	パーティカルハンドル

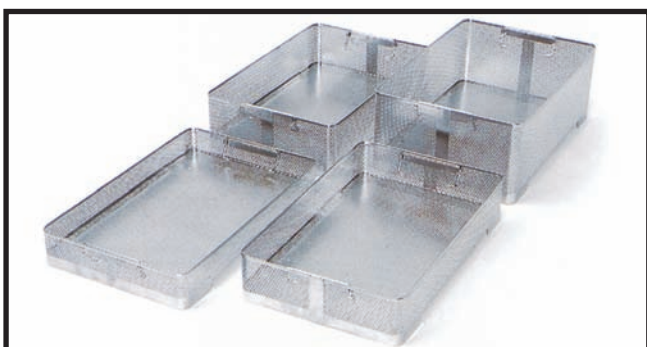

●ミッドサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-636-05	BP2-2V	420×267×50	パーティカルハンドル
08-636-06	BP2-3V	420×267×76	パーティカルハンドル
08-636-07	BP2-4V	420×267×100	パーティカルハンドル
08-636-08	BP2-6V	420×267×152	パーティカルハンドル



●フルサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-636-09	BP3-2V	520×267×50	パーティカルハンドル
08-636-10	BP3-3V	520×267×76	パーティカルハンドル
08-636-11	BP3-4V	520×267×100	パーティカルハンドル
08-636-12	BP3-5V	520×267×127	パーティカルハンドル



●ミニサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-635-01	BPO-1A	229×127×44	スタンダードハンドル



GENESIS BA

パンチングバスケット




●クォーターサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-636-01	BP0-2V	178×279×50	パーティカルハンドル



●エンドサイズバスケット(スモール/S・ラージ/L)

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-636-13	BP4-2V	470×152×50	(S)パーティカルハンドル
08-636-14	BP4-4V	470×152×100	(S)パーティカルハンドル
08-636-15	BP5-2V	660×203×50	(L)パーティカルハンドル
08-636-16	BP5-4V	660×203×100	(L)パーティカルハンドル

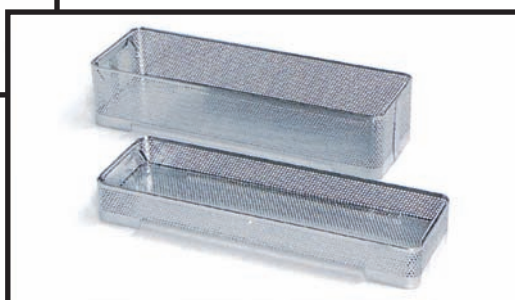

スタッキングバスケット(積み重ね用)



●ハーフサイズ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-637-01	BP1-1AS	229×254×25	スタンダードハンドル
08-637-09	BP1-2VS	229×254×50	パーティカルハンドル

●ミッドサイズ


商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-637-03	BP2-1AS	413×254×25	スタンダードハンドル
08-637-10	BP2-2VS	413×254×50	パーティカルハンドル

●フルサイズ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-637-05	BP3-1AS	527×254×25	スタンダードハンドル
08-637-11	BP3-2VS	527×254×50	パーティカルハンドル




S K E T L I N E U P

Genesis
Container
System

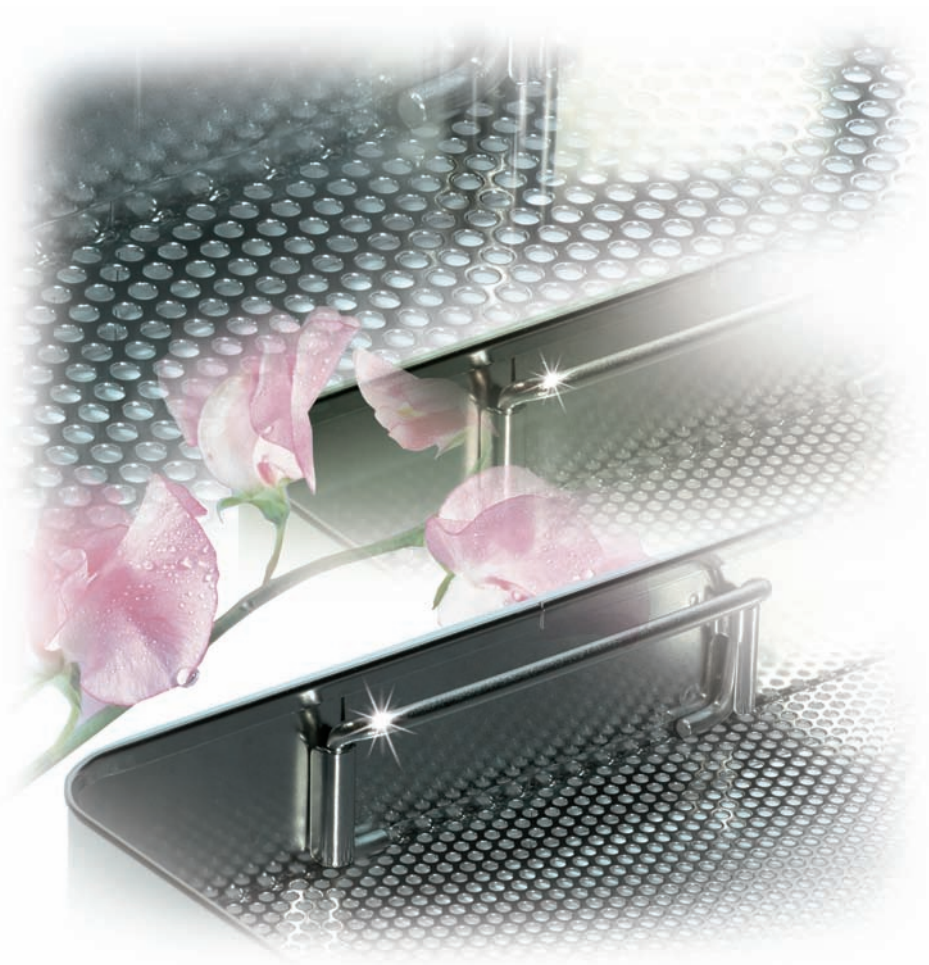

CD-B・C/CR Series アクセサリー

※注意 本コンテナを使用する際は、必ず以下の専用オプション品をご使用ください。

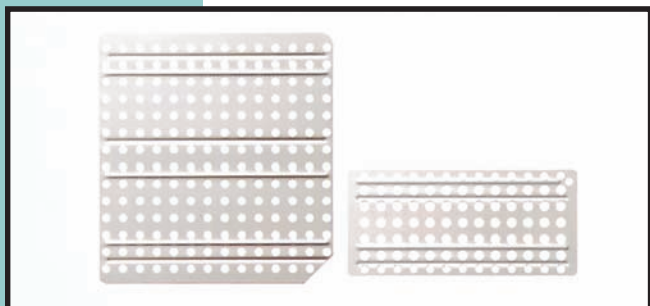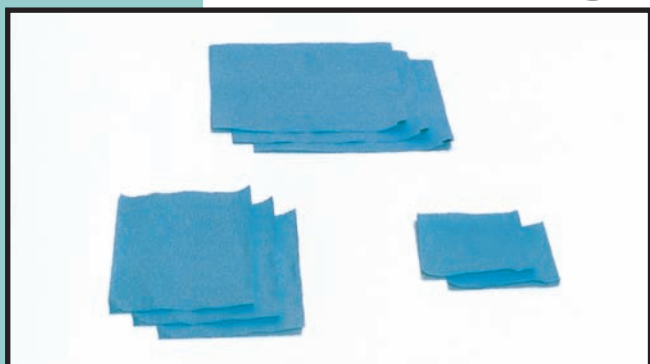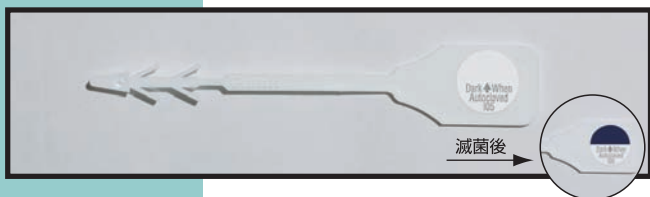

●蒸気滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	規格
08-639-03	AS2-2	蒸気用(白) 500本
08-639-04	AS2-3	蒸気用(白) 1,000本

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

●EOG滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	規格
08-639-01	AG2-1	ガス用(黄) 150本
08-639-02	AG2-2	ガス用(黄) 500本

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

●フィルターペーパー (1箱1,000枚入)(蒸気滅菌・EOG滅菌専用)

商品コード	Genesis No.	規格
08-640-01	F03-1	ミニサイズ用
08-640-02	F03-2	クォーター/エンドサイズ用
08-640-03	FX3-1	ハーフ/ミッド/フル/レトラクターサイズ用

注:過酸化水素プラズマ滅菌には、使用できません。

●データカード(蒸気滅菌・EOG滅菌専用)

商品コード	Genesis No.	規格
08-641-01	MD1-1	1箱500枚入り

注:過酸化水素プラズマ滅菌には、使用できません。

●フィルター保護板 (蒸気滅菌・EOG滅菌専用)

商品コード	Genesis No.	規格
08-661-11	RP30-2	ハーフ/ミッド/フル(2枚必要)用
08-661-18	R1190	クォーター用
08-661-21	R1384	エンドサイズスモール用


注:過酸化水素プラズマ滅菌には、使用できません。

●CD-B・Cシリーズのコンテナ本体及びオプション品は、過酸化水素プラズマ滅菌器STERRAD®には使用できません。
●必ず滅菌方法に適合した専用インジケータアローを使用してください。

過酸化水素プラズマ滅菌対応コンテナ専用

CD-ST Series アクセサリー

※注意 本コンテナを使用する際は、必ず以下の専用オプション品をご使用ください。

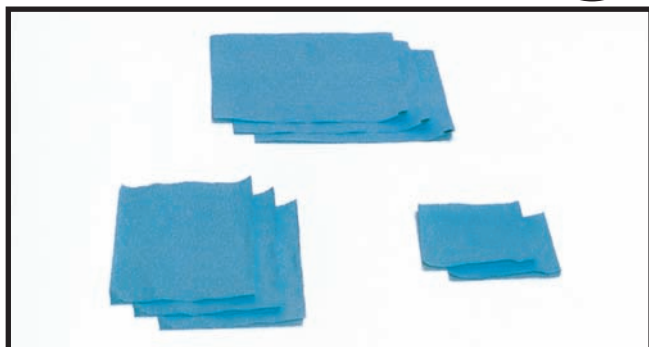

●過酸化水素プラズマ滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	規格	
08-639-11	AH2-1	ステラッド用(ピンク)	150本

注:本製品の箱表面に有効期限が記載されています。
有効期限の過ぎた製品は、使用しないでください。
注:湿気が無く涼しい場所(15~30℃)で、アルカリや酸性の化学物質から遠ざけて保管してください。

●蒸気滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	規格	
08-639-03	AS2-2	蒸気用(白)	500本
08-639-04	AS2-3	蒸気用(白)	1,000本

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

●EOG滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	規格	
08-639-01	AG2-1	ガス用(黄)	150本
08-639-02	AG2-2	ガス用(黄)	500本

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

●フィルターペーパー

商品コード	Genesis No.	規格	
08-640-11	FST-1	ミニサイズ用	500枚入
08-640-12	FST-2	クォーター/エンドサイズ用	500枚入
08-640-16	NST-3	ハーフ/ミッド/フル	1,000枚入

注:FSTシリーズは蒸気滅菌、EOG滅菌、過酸化水素プラズマ滅菌に対応しています。
注:NSTシリーズは過酸化水素プラズマ滅菌専用です。


●データカード

商品コード	Genesis No.	規格	
08-639-41	MH1-1	1箱500枚入り	

注:データカードMD1-1は、使用しないでください。


GENESIS MICRO T

アクセサリ

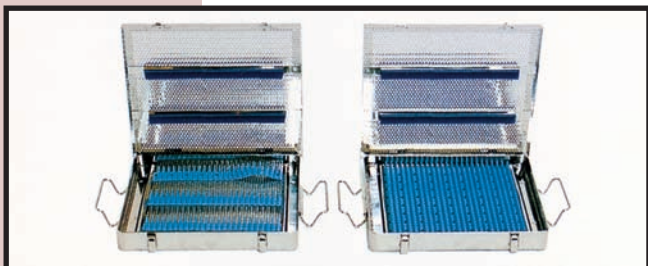

●マイクロトレー

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	規格
08-638-01	TM1-1	254×234×32	ハーフサイズ(シリコンストリップ付)
08-638-02	TM1-2	254×234×32	ハーフサイズ(シリコンパッド付)
08-638-03	TM2-1	381×234×32	ミッドサイズ(シリコンストリップ付)
08-638-04	TM2-2	381×234×32	ミッドサイズ(シリコンパッド付)

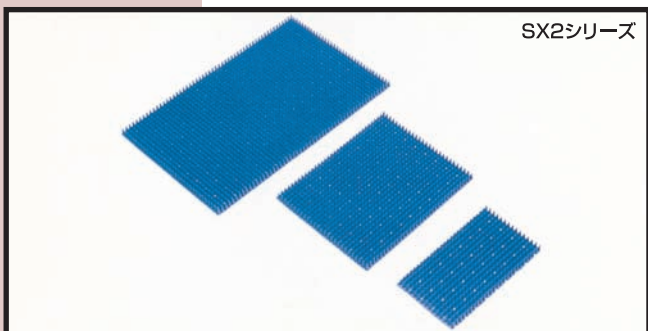

SX2シリーズ

●シリコンパッド

SX2シリーズ

商品コード	Genesis No.	サイズ(mm)	規格
08-644-01	SX2-0	203×100	ミニサイズ用
08-644-02	SX2-1	203×254	ハーフサイズ用
08-644-03	SX2-2	406×254	ミッドサイズ用
08-644-04	SX2-5	152×254	クォーターサイズ用



GPMシリーズ




GPMシリーズ

商品コード	Genesis No.	サイズ(mm)	規格
08-644-20	GPM1-A	267×232	ハーフサイズ用
08-644-21	GPM2-A	415×266	ミッドサイズ用
08-644-22	GPM3-A	515×267	フルサイズ用
08-644-23	GPM1-1AS	254×224	ハーフスタッキング1インチ高用
08-644-24	GPM1-2AS	254×224	ハーフスタッキング2インチ高用
08-644-25	GPM2-1AS	410×256	ミッドスタッキング1インチ高用
08-644-26	GPM2-2AS	410×256	ミッドスタッキング2インチ高用
08-644-27	GPM3-1AS	510×257	フルスタッキング1インチ高用
08-644-28	GPM3-2AS	510×257	フルスタッキング2インチ高用
08-644-29	GPM0-3A	223×116	ミニ用
08-644-30	GPM0-4A	274×170	クォーター用



●コンテナ用IDタグ

商品コード	Genesis No.	規格
08-642-01	TC2-1	黒
08-642-02	TC2-2	青
08-642-03	TC2-3	茶
08-642-04	TC2-4	金
08-642-05	TC2-5	緑
08-642-06	TC2-6	赤
08-642-07	TC2-7	銀
08-642-08	TC2-8	オレンジ
08-642-09	TC2-9	紫

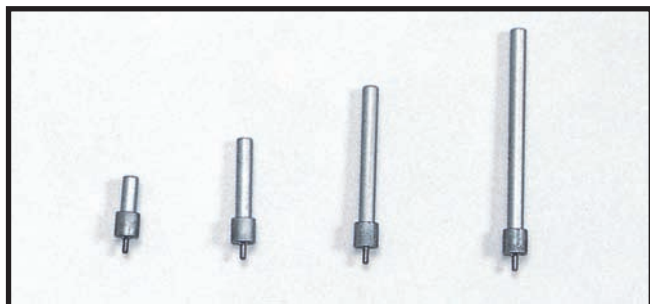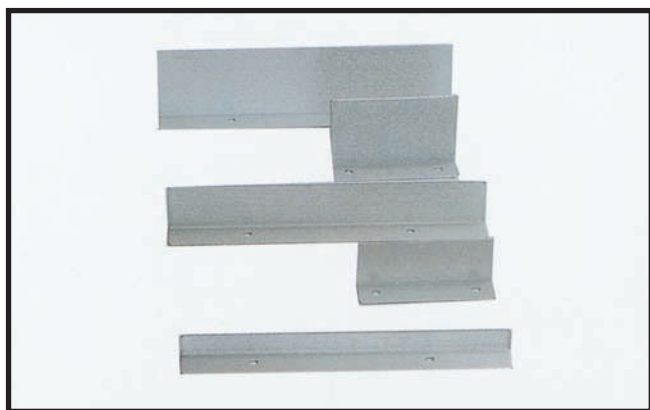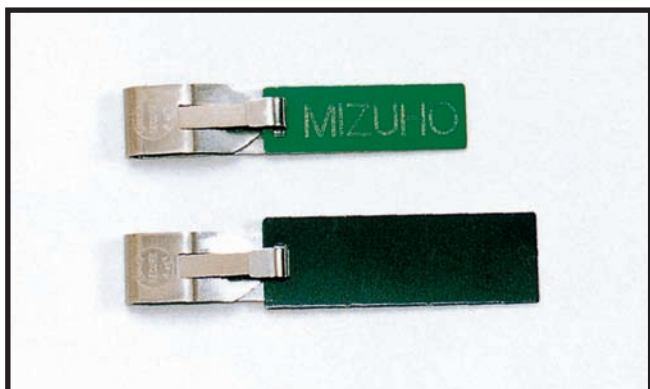

商品コード	Genesis No.	規格
08-643-01	TB1-1	スタンダード 黒
08-643-02	TB1-2	スタンダード 青
08-643-03	TB1-3	スタンダード 茶
08-643-04	TB1-4	スタンダード 金
08-643-05	TB1-5	スタンダード 緑
08-643-06	TB1-6	スタンダード 赤
08-643-07	TB1-7	スタンダード 銀
08-643-08	TB1-8	スタンダード オレンジ
08-643-09	TB1-9	スタンダード 紫
08-643-10	TB2-1	ラージ 黒
08-643-11	TB2-2	ラージ 青
08-643-12	TB2-3	ラージ 茶
08-643-13	TB2-4	ラージ 金
08-643-14	TB2-5	ラージ 緑
08-643-15	TB2-6	ラージ 赤
08-643-16	TB2-7	ラージ 銀
08-643-17	TB2-8	ラージ オレンジ
08-643-18	TB2-9	ラージ 紫
08-643-19	TB3-1	エクストララージ 黒

商品コード	Genesis No.	規格
08-646-01	DP1-1	254×63 (mm)
08-646-02	DP1-2	108×63 (mm)
08-646-03	DP1-3	254×38 (mm)
08-646-04	DP1-4	108×38 (mm)
08-646-05	DP1-5	254×19 (mm)

商品コード	Genesis No.	規格
08-648-01	PP1-1	25 (mm)
08-648-02	PP1-2	38 (mm)
08-648-03	PP1-2.5	50 (mm)
08-648-04	PP1-3	63 (mm)
08-648-05	PP1-4	89 (mm)

GENESIS CONTAIN

ジェネシスコンテナーシステム商品明細

商品コード	JANコード	Genesis No.	商品名	サイズ L×W×H(mm)
※ 08-629-01	4946329124323	CD1-4ST	ハーフサイズコンテナー 底穴あり	279×305×100
※ 08-629-02	4946329124330	CD1-5ST	ハーフサイズコンテナー 底穴あり	279×305×127
※ 08-629-03	4946329124347	CD1-6ST	ハーフサイズコンテナー 底穴あり	279×305×152
※ 08-629-04	4946329124354	CD2-4ST	ミッドサイズコンテナー 底穴あり	483×305×100
※ 08-629-05	4946329124361	CD2-5ST	ミッドサイズコンテナー 底穴あり	483×305×127
※ 08-629-06	4946329124378	CD2-6ST	ミッドサイズコンテナー 底穴あり	483×305×152
※ 08-629-07	4946329124385	CD3-4ST	フルサイズコンテナー 底穴あり	584×305×100
※ 08-629-08	4946329124392	CD3-5ST	フルサイズコンテナー 底穴あり	584×305×127
※ 08-629-09	4946329124408	CD3-6ST	フルサイズコンテナー 底穴あり	584×305×152
※ 08-629-10	4946329124415	CD0-3ST	ミニサイズコンテナー 底穴あり	267×190×76
※ 08-629-11	4946329124422	CD0-4ST	クォーターサイズコンテナー 底穴あり	305×203×100
※ 08-629-12	4946329124439	CD4-3ST	スモールサイズコンテナー 底穴あり	533×178×76
※ 08-629-13	4946329124446	CD4-5ST	スモールサイズコンテナー 底穴あり	533×178×140
※ 08-630-01	4946329071665	CD0-3C	ミニサイズコンテナー 底穴なし	267×190×76
※ 08-630-02	4946329071672	CD0-4C	クォーターサイズコンテナー 底穴なし	305×203×100
※ 08-630-03	4946329071689	CD1-4C	ハーフサイズコンテナー 底穴なし	279×305×100
※ 08-630-04	4946329071696	CD1-5C	ハーフサイズコンテナー 底穴なし	279×305×127
※ 08-630-05	4946329071702	CD1-6C	ハーフサイズコンテナー 底穴なし	279×305×152
※ 08-630-06	4946329071719	CD2-4C	ミッドサイズコンテナー 底穴なし	483×305×100
※ 08-630-07	4946329071726	CD2-5C	ミッドサイズコンテナー 底穴なし	483×305×127
※ 08-630-08	4946329071733	CD2-6C	ミッドサイズコンテナー 底穴なし	483×305×152
※ 08-630-09	4946329071740	CD2-8C	ミッドサイズコンテナー 底穴なし	483×305×203
※ 08-630-10	4946329071757	CD3-4C	フルサイズコンテナー 底穴なし	584×305×100
※ 08-630-11	4946329071764	CD3-5C	フルサイズコンテナー 底穴なし	584×305×127
※ 08-630-12	4946329071771	CD3-6C	フルサイズコンテナー 底穴なし	584×305×152
※ 08-630-13	4946329071788	CD3-7C	フルサイズコンテナー 底穴なし	584×305×178
08-631-01	4946329071825	CD0-3B	ミニサイズコンテナー 底穴あり	267×190×76
08-631-02	4946329071832	CD0-4B	クォーターサイズコンテナー 底穴あり	305×203×100
08-631-03	4946329071849	CD1-4B	ハーフサイズコンテナー 底穴あり	279×305×100
08-631-04	4946329071856	CD1-5B	ハーフサイズコンテナー 底穴あり	279×305×127
08-631-05	4946329071863	CD1-6B	ハーフサイズコンテナー 底穴あり	279×305×152
08-631-06	4946329071870	CD2-4B	ミッドサイズコンテナー 底穴あり	483×305×100
08-631-07	4946329071887	CD2-5B	ミッドサイズコンテナー 底穴あり	483×305×127
08-631-08	4946329071894	CD2-6B	ミッドサイズコンテナー 底穴あり	483×305×152
08-631-09	4946329071900	CD2-8B	ミッドサイズコンテナー 底穴あり	483×305×203
08-631-10	4946329071917	CD3-4B	フルサイズコンテナー 底穴あり	584×305×100
08-631-11	4946329071924	CD3-5B	フルサイズコンテナー 底穴あり	584×305×127
08-631-12	4946329071931	CD3-6B	フルサイズコンテナー 底穴あり	584×305×152
08-631-13	4946329071948	CD3-7B	フルサイズコンテナー 底穴あり	584×305×178
※ 08-631-14	4946329071955	CD4-5B	エンドサイズコンテナー 底穴あり スモール	533×178×140
※ 08-631-15	4946329071962	CD5-61B	エンドサイズコンテナー 底穴あり ラージ	711×279×152
※ 08-632-01	4946329071986	CR1-6	リムーバルコンテナー(回収・密封用)	279×305×152
※ 08-632-02	4946329071993	CR2-6	リムーバルコンテナー(回収・密封用)	483×305×152
※ 08-632-03	4946329072006	CR3-6	リムーバルコンテナー(回収・密封用)	584×305×152

※ 受注生産品のため納期に時間がかかる場合がありますのでご注意ください。




商品コード	JANコード	Genesis No.	商品名	サイズ L×W×H(mm)
※ 08-635-01	4946329072143	BPO-1A	パンチングバスケット ミニサイズ スタンダードハンドル	229×127×44
08-636-01	4946329072327	BPO-2V	パンチングバスケット クォーターサイズ パーティカルハンドル	178×279×50
08-636-02	4946329072334	BP1-2V	パンチングバスケット ハーフサイズ パーティカルハンドル	234×267×50
08-636-03	4946329072341	BP1-3V	パンチングバスケット ハーフサイズ パーティカルハンドル	234×267×76
08-636-04	4946329072358	BP1-4V	パンチングバスケット ハーフサイズ パーティカルハンドル	234×267×100
08-636-05	4946329072365	BP2-2V	パンチングバスケット ミッドサイズ パーティカルハンドル	420×267×50
08-636-06	4946329072372	BP2-3V	パンチングバスケット ミッドサイズ パーティカルハンドル	420×267×76
08-636-07	4946329072389	BP2-4V	パンチングバスケット ミッドサイズ パーティカルハンドル	420×267×100
08-636-08	4946329072396	BP2-6V	パンチングバスケット ミッドサイズ パーティカルハンドル	420×267×152
08-636-09	4946329072402	BP3-2V	パンチングバスケット フルサイズ パーティカルハンドル	520×267×50
08-636-10	4946329072419	BP3-3V	パンチングバスケット フルサイズ パーティカルハンドル	520×267×76
08-636-11	4946329072426	BP3-4V	パンチングバスケット フルサイズ パーティカルハンドル	520×267×100
08-636-12	4946329072433	BP3-5V	パンチングバスケット フルサイズ パーティカルハンドル	520×267×127
※ 08-636-13	4946329072440	BP4-2V	パンチングバスケット エンドサイズ スモール パーティカルハンドル	470×152×50
※ 08-636-14	4946329072457	BP4-4V	パンチングバスケット エンドサイズ スモール パーティカルハンドル	470×152×100
※ 08-636-15	4946329072464	BP5-2V	パンチングバスケット エンドサイズ ラージ パーティカルハンドル	660×203×50
※ 08-636-16	4946329072471	BP5-4V	パンチングバスケット エンドサイズ ラージ パーティカルハンドル	660×203×100
※ 08-637-01	4946329072495	BP1-1AS	スタッキングバスケット ハーフサイズ スタンダードハンドル	229×254×25
※ 08-637-03	4946329072518	BP2-1AS	スタッキングバスケット ミッドサイズ スタンダードハンドル	413×254×25
※ 08-637-05	4946329072532	BP3-1AS	スタッキングバスケット フルサイズ スタンダードハンドル	527×254×25
08-637-09	4946329072570	BP1-2VS	スタッキングバスケット ハーフサイズ パーティカルハンドル	229×254×50
08-637-10	4946329072587	BP2-2VS	スタッキングバスケット ミッドサイズ パーティカルハンドル	413×254×50
08-637-11	4946329072594	BP3-2VS	スタッキングバスケット フルサイズ パーティカルハンドル	527×254×50
※ 08-638-01	4946329072624	TM1-1	マイクローレー(シリコンストリップ付)	254×234×32
※ 08-638-02	4946329072631	TM1-2	マイクローレー(シリコンパット付)	254×234×32
※ 08-638-03	4946329072648	TM2-1	マイクローレー(シリコンストリップ付)	381×234×32
※ 08-638-04	4946329072655	TM2-2	マイクローレー(シリコンパット付)	381×234×32
08-639-01	4946329072662	AG2-1	インジケータアロー ガス用(黄)	150本入り
08-639-02	4946329072679	AG2-2	インジケータアロー ガス用(黄)	500本入り
08-639-03	4946329072686	AS2-2	インジケータアロー 蒸気用(白)	500本入り
08-639-04	4946329072693	AS2-3	インジケータアロー 蒸気用(白)	1000本入り
08-639-11	4946329124484	AH2-1	インジケータアロー ステラッド用(ピンク)	150本入り
08-639-41	4946329124491	MH1-1	データカード	1箱500枚入り
08-640-01	4946329072709	FO3-1	フィルターペーパー ミニサイズ用	1箱1,000枚入
08-640-02	4946329072716	FO3-2	フィルターペーパー クォーター/エンドサイズ用	1箱1,000枚入
08-640-03	4946329072723	FX3-1	フィルターペーパー ハーフ/ミッド/フル/トラクターサイズ用	1箱1,000枚入
08-640-11	4946329124453	FST-1	フィルターペーパー ミニサイズ用	1箱500枚入
08-640-12	4946329124460	FST-2	フィルターペーパー クォーター/エンドサイズ用	1箱500枚入
08-640-16	4946329184778	NST-3	フィルターペーパー ハーフ/ミッド/フル/トラクターサイズ用	1箱1,000枚入
08-641-01	4946329072761	MD1-1	データカード	1箱500枚入り



(セット例)

商品コード	JANコード	Genesis No.	商品名	サイズ L×W×H(mm)
08-642-01	4946329072778	TC2-1	コンテナ用IDタグ 黒	1個入り
08-642-02	4946329072785	TC2-2	コンテナ用IDタグ 青	1個入り
08-642-03	4946329072792	TC2-3	コンテナ用IDタグ 茶	1個入り
08-642-04	4946329072808	TC2-4	コンテナ用IDタグ 金	1個入り
08-642-05	4946329072815	TC2-5	コンテナ用IDタグ 緑	1個入り
08-642-06	4946329072822	TC2-6	コンテナ用IDタグ 赤	1個入り
08-642-07	4946329072839	TC2-7	コンテナ用IDタグ 銀	1個入り
08-642-08	4946329072846	TC2-8	コンテナ用IDタグ オレンジ	1個入り
08-642-09	4946329072853	TC2-9	コンテナ用IDタグ 紫	1個入り
08-643-01	4946329072860	TB1-1	バスケット用IDタグ スタンダード 黒	1個入り
08-643-02	4946329072877	TB1-2	バスケット用IDタグ スタンダード 青	1個入り
08-643-03	4946329072884	TB1-3	バスケット用IDタグ スタンダード 茶	1個入り
08-643-04	4946329072891	TB1-4	バスケット用IDタグ スタンダード 金	1個入り
08-643-05	4946329072907	TB1-5	バスケット用IDタグ スタンダード 緑	1個入り
08-643-06	4946329072914	TB1-6	バスケット用IDタグ スタンダード 赤	1個入り
08-643-07	4946329072921	TB1-7	バスケット用IDタグ スタンダード 銀	1個入り
08-643-08	4946329072938	TB1-8	バスケット用IDタグ スタンダード オレンジ	1個入り
08-643-09	4946329072945	TB1-9	バスケット用IDタグ スタンダード 紫	1個入り
※ 08-643-10	4946329072952	TB2-1	バスケット用IDタグ ラージ 黒	1個入り
08-643-11	4946329072969	TB2-2	バスケット用IDタグ ラージ 青	1個入り
08-643-12	4946329072976	TB2-3	バスケット用IDタグ ラージ 茶	1個入り
08-643-13	4946329072983	TB2-4	バスケット用IDタグ ラージ 金	1個入り
08-643-14	4946329072990	TB2-5	バスケット用IDタグ ラージ 緑	1個入り
08-643-15	4946329073003	TB2-6	バスケット用IDタグ ラージ 赤	1個入り
※ 08-643-16	4946329073010	TB2-7	バスケット用IDタグ ラージ 銀	1個入り
※ 08-643-17	4946329073027	TB2-8	バスケット用IDタグ ラージ オレンジ	1個入り
※ 08-643-18	4946329073034	TB2-9	バスケット用IDタグ ラージ 紫	1個入り
※ 08-643-19	4946329073041	TB3-1	バスケット用IDタグ エクストララージ 黒	1個入り

商品コード	JANコード	Genesis No.	商品名	サイズ (mm)
08-644-01	4946329073058	SX2-0	シリコンパッド ミニサイズ用	203×100
08-644-02	4946329073065	SX2-1	シリコンパッド ハーフサイズ用	203×254
08-644-03	4946329073072	SX2-2	シリコンパッド ミッドサイズ用	406×254
08-644-04	4946329073089	SX2-5	シリコンパッド クォーターサイズ用	152×254
08-644-20	4946329146141	GPM1-A	ハーフサイズ用	267×232
08-644-21	4946329146158	GPM2-A	ミッドサイズ用	415×266
08-644-22	4946329146165	GPM3-A	フルサイズ用	515×267
08-644-23	4946329146172	GPM1-1AS	ハーフスタッキング1インチ高用	254×224
08-644-24	4946329146189	GPM1-2AS	ハーフスタッキング2インチ高用	254×224
08-644-25	4946329146196	GPM2-1AS	ミッドスタッキング1インチ高用	410×256
08-644-26	4946329146202	GPM2-2AS	ミッドスタッキング2インチ高用	410×256
08-644-27	4946329146219	GPM3-1AS	フルスタッキング1インチ高用	510×257
08-644-28	4946329146226	GPM3-2AS	フルスタッキング2インチ高用	510×257
08-644-29	4946329146233	GPM0-3A	ミニ用	223×116
08-644-30	4946329146240	GPM0-4A	クォーター用	274×170
※ 08-646-01	4946329073225	DP1-1	仕切り板	254×63
※ 08-646-02	4946329073232	DP1-2	仕切り板	108×63
※ 08-646-03	4946329073249	DP1-3	仕切り板	254×38
※ 08-646-04	4946329073256	DP1-4	仕切り板	108×38
※ 08-646-05	4946329073263	DP1-5	仕切り板	254×19
※ 08-648-01	4946329073386	PP1-1	ホールディングピン 25 (mm)	1個入り
※ 08-648-02	4946329073393	PP1-2	ホールディングピン 38 (mm)	1個入り
※ 08-648-03	4946329073409	PP1-2.5	ホールディングピン 50 (mm)	1個入り
※ 08-648-04	4946329073416	PP1-3	ホールディングピン 63 (mm)	1個入り
※ 08-648-05	4946329073423	PP1-4	ホールディングピン 89 (mm)	1個入り
08-661-11	4946329074130	RP30-2	フィルター保護板 ハーフ/ミッド/フル(2枚必要)用	1枚入り
※ 08-661-18	4946329074208	R1190	フィルター保護板 クォーター用	1枚入り
※ 08-661-21	4946329074239	R1384	フィルター保護板 エンドサイズモール用	1枚入り

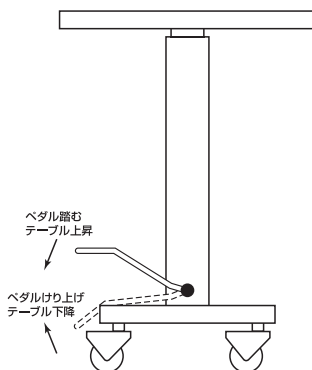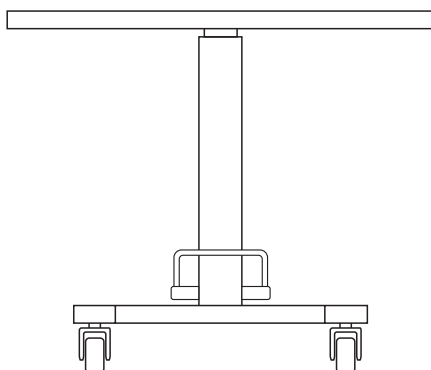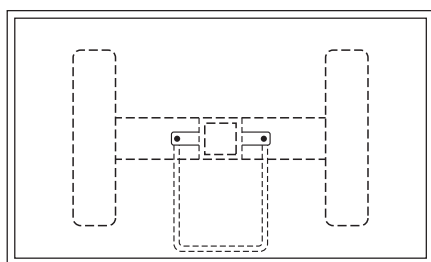

コンテナ用展開台




商品コード	JANコード	商品名
※ 08-332-00	4946329129359	コンテナ用展開台

展開台もご用意しておりますのでお問い合わせください。

足踏み昇降式	850～1,250mm
天板寸法	1,000mm×600mm

GENESIS NAME OF

各部名称

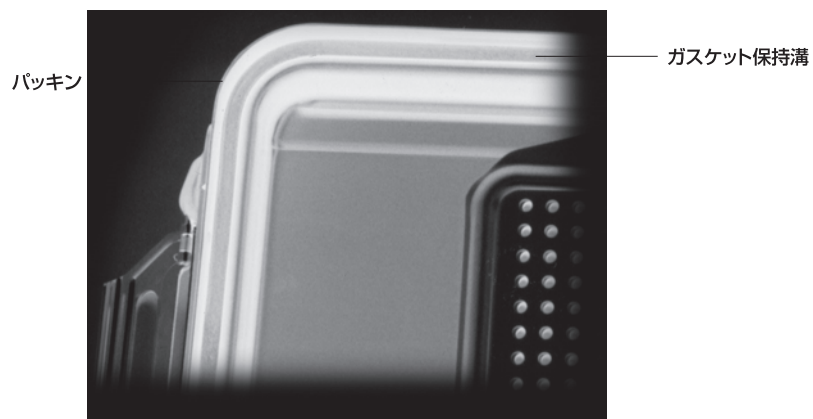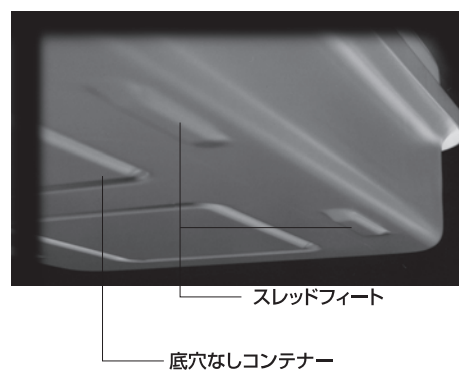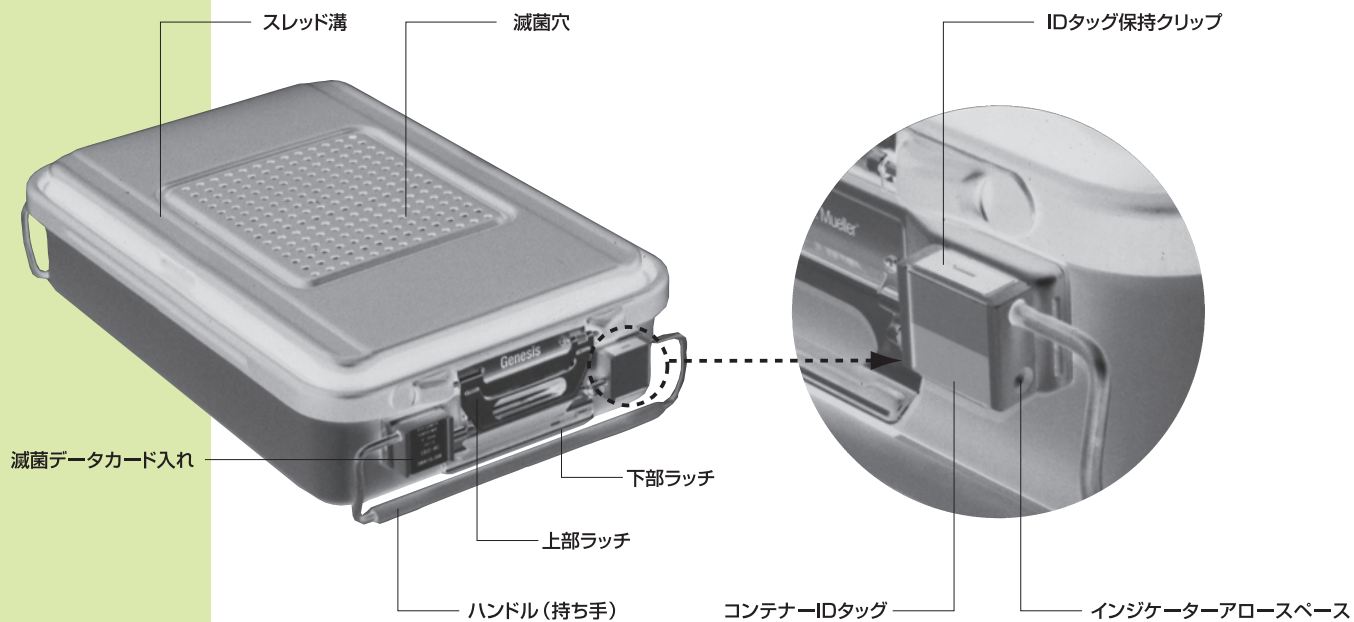



注意

蓋を外す

次のような状態が1つでもあればコンテナの中身は無菌状態とはいえません。

- フィルターが入っていない。
- フィルター保持板が外れている。
- 穴の区域にフィルターが取り付けられていないか、穴を囲む外枠をフィルターがおおっていない。
- フィルターが濡れている。
- フィルターに穴が開いている。
- インジケーターアローがどちらかのロックにはまっていない。
- インジケーターアローが使用前に切れている。
- インジケーターアローに付いているインジケーターの色が変わっていない。
- インジケーターアローに外部インジケーターが付いていない。
- 病院の方針が別に定めていない場合に、バスケットに内部インジケーターかインテグレーターが入っていない。
- バスケットに入っている内部インジケーターの色が変わらなかった。あるいは、インテグレーターを使用した場合に「合格」ではなく「不合格」を示している。
- コンテナに水が入っている。
- パッキンが損傷しているか保持溝にきちんと入っていない。

予防保守点検表

コンテナが本来の性能を発揮するには、下記の事項を日常的に点検しなければなりません。次のような状態が1つでもあればコンテナは正しく機能しません。

蓋

- ラッチが曲がっている。
- ラッチを上下に動かす時にどこかが引っ掛かる感じがする。
- ラッチのブラケットが蓋から離れている。
- パッキンに切れ目や穴があるかぼろぼろになっている。
- パッキンの継ぎ目がくっついていない。
- パッキンが保持溝にきちんととはまっていない。
- パッキンにへこみがありきちんと密閉出来ない。
- コンテナに水が入っている。
- パッキンが損傷しているか保持溝にきちんと入っていない。

コンテナ本体

- ラッチがゆるんだり、コンテナから外れそうになっている。
- ラッチのバネが曲がっているか突き出ている。
- IDタグがない。
- ハンドル(持手)のスリーブがひび割れているか裂けている。
- パッキンと接するコンテナ上端にへこみがある。

保持板

- 形が歪んでいる。
- レバーが曲がっている。
- レバーが保持板をちゃんと固定出来ない。

使用上の注意

洗浄

- ご購入後初めて使用を行う場合には、必ず洗浄を行って下さい。
- コンテナには陽極酸化仕上げが施してあるので、中性pH洗剤を使って下さい。
- コンテナ表面を研磨性洗剤や金属フラスでこすらないで下さい。
- コンテナの構成部品を超音波クリーナーに入れて洗浄しないで下さい。
- 水質や洗浄剤の影響で、コンテナ表面の色落ち もしくはむらが生じる場合があります。

組み立て

- フィルターは1回使用したら捨てて下さい。再使用は絶対にしないで下さい。
- バスケットに詰め込みすぎないで下さい。バスケットとコンテナの高さの差は少なくとも5cm必要です。
- 小袋やカウントシート等の軽い物は固定し、コンテナ内の穴を塞がないようにして下さい。
塞ぐと真空サイクル中にコンテナが潰れることがあります。
- 裏に接着剤が付いているラベルやテープをコンテナの表面に貼らないで下さい。

滅菌

- 重力サイクルの時はコンテナを積み重ねないで下さい。
- 底穴なしコンテナは真空サイクルの時だけ使えます。
- 蓋の穴をなにかに包んだトレイ、小袋等で塞がないで下さい。
- コンテナと他の物を一緒に滅菌する時はコンテナを吸収性のもので包んだ物品よりも下に位置させて下さい。
- ご購入後初めて使用を行う場合には、必ず洗浄を行って下さい。
- フィルターペーパーは滅菌バリアの役割をはたしており、使用においては取り付けが必要です。フィルター無しの滅菌試験は行っておらず、滅菌性の確認はできません。

その他、詳細については使用説明書をご覧ください。

滅菌する機械についての注意点



- ① 機器の材質等により、滅菌方法に適しない場合がありますので、事前に各機器メーカーに確認してください。
- ② 内腔のあるような複雑な物は機器メーカーの指示に従って滅菌をおこなってください。
- ③ STシリーズは内腔のあるステンレス製器具の内、直径3mm以上で長さ400mm以内のものだけに使用を限定します。なお詳細は滅菌器メーカーにお尋ねください。
- ④ 容器はステラッド®滅菌器の中で積み重ねないでください。

事前注意事項

小さなバスケット類、トレイ類及びその他の付属品(特に蓋やカバーが付いている付属品)を滅菌する場合、滅菌容器にはそのために、専用に製作された滅菌容器だけを使用するようにすべきです。

発売元

瑞穂医科工業株式会社

URL <http://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
◆手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
◆整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK小田急ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8062 新潟市中央区西堀前通1-702 西堀一番町ビル6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東エリア 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 日鉄本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 習 志 野 工 場 〒274-0071 千葉県船橋市習志野4-11-6

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

製造元  **CareFusion**



注意

- 事前に取扱説明書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。